

# User manual

MANUEL D'UTILISATION  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K OBSLUZE

## Mia



## Rehausse toilettes Mia

Merci de la confiance que vous accordez aux produits de Vermeiren. Ce manuel est destiné à vous aider dans l'utilisation de ce produit. Veuillez le lire attentivement. Si vous avez encore des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur spécialisé. Sur notre site Internet [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com), vous trouverez toujours la dernière version des informations décrites dans le présent manuel. Veuillez consulter régulièrement ce site Internet pour connaître les éventuelles mises à jour. Les personnes malvoyantes peuvent télécharger la version électronique de ce manuel et la lire au moyen d'une application de texte-parole.

### 1 Lors de la livraison

Déballer le produit et contrôlez si la livraison est complète. Se trouvent dans le paquet:

- 1 siège de toilette surélevé avec couvercle
- 2 régleurs de largeur
- En option : coussin de siège de toilette
- Manuel d'instructions

Inspectez soigneusement l'expédition afin de vous assurer que le transport n'a occasionné aucun dommage. S'il s'avère que votre produit présente un défaut, prenez contact avec le transporteur.

### 2 Montage et utilisation du rehausse toilettes

**ATTENTION**

Risque de blessures

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège de toilette surélevé est solidement fixé aux toilettes.
- Pour vous assurer que le siège reste correctement installé, desserrez et resserrez les régleurs de largeur une fois par semaine.
- Ne dépassez pas le poids utilisateur maximum.

Indications et contre-indications : Notre rehausse toilettes a été dessinée pour relever vos toilettes à une hauteur confortable, et ainsi simplifier l'assise et le relevé, par exemple en cas de : dysfonctionnement des membres inférieurs dû à une mobilité articulaire limitée ou nulle, une force musculaire réduite dans les membres inférieurs, une lésion de la colonne lombaire, une lésion du système nerveux,...


L'objectif de ce produit est de permettre une utilisation indépendante ou plus indépendante des toilettes. Utilisé en conséquence, aucune contre-indication n'est connue.

Mia est disponible en 2 hauteurs d'assise : 10 cm ou 15 cm.

Le poids utilisateur maximum du siège de toilette est de 225 kg.

Pour installer Mia:

1. Soulevez le couvercle et le siège des toilettes. Si nécessaire, retirez le couvercle et le siège.
2. Insérez les régleurs de largeur (1) en place sur le siège de toilette surélevé. Tournez le bouton étoile dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire un peu la largeur.
3. Placez le siège de toilette surélevé sur le rebord des toilettes [A] avec le rebord avant (2) vers l'extérieur.
4. Poussez le siège de toilette surélevé vers l'arrière [B] aussi loin que possible.
5. Serrez les régleurs de largeur (1) à la main.

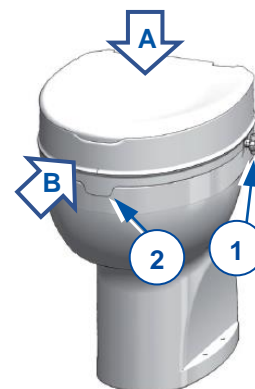

Pour placer le coussin optionnel, retirez la housse du siège surélevé.

Abaissez-vous lentement sur le siège de toilette surélevé en pliant les coudes, les hanches et les genoux si possible. Ne vous tenez pas au siège surélevé pour vous soutenir lorsque vous vous abaissez/ vous levez.

### 3 Entretien

Votre rehausse toilette est fabriqué en plastique. Mia peut être nettoyée et désinfectée avec des produits ménagers d'entretien. Évitez l'utilisation de produits agressifs ou abrasifs qui pourraient causer une décoloration du produit.

#### 3.1 Durée de vie attendue

Le rehausse toilette est conçue pour avoir une durée de vie moyenne de 5 ans.

## 4 Détails techniques

<b>Marque</b>	<b>Vermeiren</b>
<b>Type</b>	<b>Rehausse toilette</b>
<b>Modèle</b>	<b>Mia</b>

<b>Description</b>	<b>Dimensions</b>
Charge Maximum	225 kg
Hauteur d'assise ajoutée	100 mm 150 mm
Largeur	365 mm
Longueur	405 mm
Température de stockage	+5°C - +41°C

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesure  $\pm 15$  mm / 1,5 kg / 1,5°



Vermeiren GROUP  
Vermeirenplein 1 / 15  
2920 Kalmthout  
BE

site web: [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)

## **Instructions pour les distributeurs**

Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque produit vendu.

Version: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

**Tous droits réservés, y compris la traduction.**