

# Illico

Lit médicalisé



**VERMEIREN**  
we care for you

# Illico

## Confortable et pratique

- Hauteur variable électriquement de 298 mm à 828 mm
- Facilement réglable à l'aide de la télécommande incluse
- Appui-tête réglable par télécommande
- Réglage de la plicature électrique (version 3 fonctions), le repose-pieds peut être réglé manuellement.
- Surface de couchage 900 mm x 2000 mm
- Télécommande avec fonction de verrouillage
- Poids utilisateur: max. 170 kg (patients et matelas)
- Barrières metal ou bois au choix
- Potence à gauche ou à droite
- Quatre roues directrices avec frein
- Panneaux élégants en bois à l'avant et à l'arrière
- Montage et démontage faciles
- Facile à transporter et à stocker grâce à son kit de transport fourni




Télécommande simple et verrouillable



Système de verouillage facile et rapide des panneaux et des barrières



Roues de haute qualité avec frein

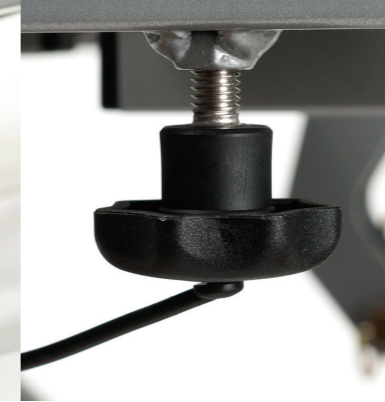


Vis de grande taille en forme d'étoile pour un (dé)montage facile



Kit de transport sur roues pour stockage facile



Démontage du châssis du lit sans outils

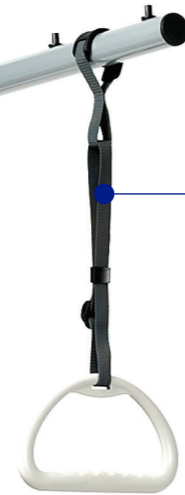

La potence peut être positionnée à gauche ou à droite du lit. La sangle peut être ajustée à la longueur désirée.



4 arrêts de matelas (2 côté tête et 2 côté pieds) pour conserver le matelas en place.

Une seule pression sur le bouton libères les barrières.



La télécommande est livrée avec un long câble pour pouvoir être accessible à n'importe quel endroit le lit.

Le repose-pieds peut être relevé manuellement dans différentes positions.



## Assemblage FACILE, rapide et sans outils

Plus besoin de chercher de tournevis ou de clés avec le lit Illico. Une seule personne sans outils peut monter ou démonter le lit en quelques minutes. Retirez les barrières, les panneaux, débranchez le lit et c'est fini !



## Plusieurs panneaux, plusieurs barrières

Pour se fondre dans votre intérieur, le lit Illico peut être équipé des panneaux oxide ou beech.



Le sommier est aussi disponible en version **ABS** pour une désinfection facile.



## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	1024 mm
■ Hauteur totale	783 - 1313 mm
■ Longueur totale	2080 mm
■ Hauteur du support de matelas, réglable	298 - 828 mm
■ Max. angle de la zone de la tête	70°
■ Max. angle de la cuisse	36,8°

## Split Siderails

En option barres latérales divisées en hêtre.



## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le lit **Illico** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

■ Max. angle de la jambe inférieure	-17,2°
■ Charge nominale de la potence	75 kg
■ Poids (hors barrières latérales, potence et triangle)	85 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)  
[info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.