

# 708 D

Fauteuils manuels standard & léger



Le fauteuil le plus étroit du marché.  
Pratique et confortable, le 708D est  
un fauteuil idéal pour un parc de location.

Système de verrouillage  
des accoudoirs simple  
et résistant

Axes à  
démontage  
rapide

Accoudoirs rabattables et démontables  
équipés de manchettes longues  
et confortables

La roulette d'angle de palette protège  
les murs et les meubles contre les chocs



## S

**708D S**  
Version surbaissée (hauteur sol/siège 470 mm). Le kit surbaissé a été spécialement conçu pour les personnes de petite taille. Idéal pour les patients hémiplegiques pour se déplacer à petits pas.



## T30

Kit T30 - poussette

708D T30 version poussette.  
Fauteuil avec kit petites roues  
arrières 12" au lieu 22".



## AMP

kit AMP (version amputé)


L'axe des roues arrière est reculé de 70 mm pour compenser la perte de poids des jambes. Ce léger déplacement du centre de gravité supprime tout risque de basculement vers l'arrière et assure une bonne stabilité.



## HEM2

Double main courante

Version hémiplegique (réversible gauche/droite). Ce système pour hémiplegique se caractérise par un dispositif spécial de 2 mains courantes montées sur la grande roue placée du côté de la main valide.

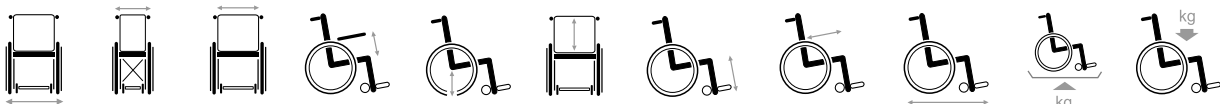

550	280	390	210	510	430	400-540	430	1100	18	120
580	280	430	210	US 510	430	400-540	430	1100	18	120
600	280	440	210	US 510	430	400-540	430	1100	19	120
620	280	480	210	US 510	430	400-540	430	1100	19	120
640	280	480	210	US 510	430	400-540	430	1100	19	120
660	280	500	210	510	430	400-540	430	1100	19	120

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

