

# Illico

Lit médicalisé



**VERMEIREN**  
we care for you

# Illico

## Confortable et pratique

- Hauteur variable électriquement de 298 mm à 828 mm
- Facilement réglable à l'aide de la télécommande incluse
- Appui-tête réglable par télécommande
- Réglage de la plicature électrique (version 3 fonctions), le repose-pieds peut être réglé manuellement.
- Surface de couchage 900 mm x 2000 mm
- Télécommande avec fonction de verrouillage
- Poids utilisateur: max. 170 kg (patients et matelas)
- Barrières métal ou bois au choix
- Potence à gauche ou à droite
- Quatre roues directrices avec frein
- Panneaux élégants en bois à l'avant et à l'arrière
- Montage et démontage faciles
- Facile à transporter et à stocker grâce à son kit de transport fourni
- 4 arrêts de matelas




Télécommande simple et verrouillable



Système de verrouillage facile et rapide des panneaux et des barrières



Roues de haute qualité avec frein

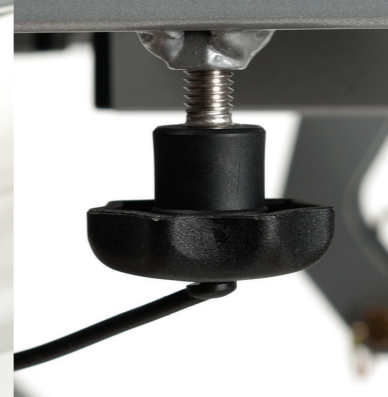

Vis de grande taille en forme d'étoile pour un (dé)montage facile



Kit de transport sur roues pour stockage facile



Démontage du châssis du lit sans outils



La potence peut être positionnée à gauche ou à droite du lit. La sangle peut être ajustée à la longueur désirée.

Le repose-pieds peut être relevé manuellement dans différentes positions.

La télécommande est livrée avec un long câble pour pouvoir être accessible à n'importe quel endroit le lit.



## Assemblage FACILE, rapide et sans outils

Plus besoin de chercher de tournevis ou de clés avec le lit Illico. Une seule personne sans outils peut monter ou démonter le lit en quelques minutes. Retirez les barrières, les panneaux, débranchez le lit et c'est fini !

Les deux derniers éléments ne pèsent que 11 et 16 kg et sont donc très faciles à transporter.



## Plusieurs panneaux, plusieurs barrières

Pour se fondre dans votre intérieur, le lit Illico peut être équipé des panneaux oxide ou beech.



## Options



Frein central au pied ou 4 roulettes pivotantes freinées



Protecteurs muraux



Rallonge (20 cm) pour la surface de couchage

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	1024 mm
■ Hauteur totale	783 - 1313 mm
■ Longueur totale	2080 mm
■ Hauteur du support de matelas, réglable	298 - 828 mm
■ Max. angle de la zone de la tête	70°
■ Max. angle de la cuisse	36,8°

## Barres latérales divisées

En option barres latérales divisées en bois ou métal.



## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

## Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le lit **Illico** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

■ Max. angle de la jambe inférieure	-17,2°
■ Charge nominale de la potence	75 kg
■ Poids (hors barrières latérales, potence et triangle)	85 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

## VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

