

# V-Drive





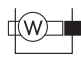



Aide électrique pour votre  
chaise roulante manuelle



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

## Caractéristiques techniques V-Drive

 largeur siège	 vitesse max.	 inclination max.	 rayon d'action	 puissance	 batterie	 poids	 poids utilisateur
390 - 480	6 km/h	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	21 kg	135 kg*
500 - 600 (version H.D.)				200 W (version H.D.)	2x12V/12Ah (version H.D.)	17,4 kg	200 kg* (version H.D.)

Dimensions en mm, poids en kg.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm et 1,5 kg. \* incl. fauteuil roulant

### Confort

Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très simples. En effet, l'accompagnateur se laisse guider par le V-Drive, pour qui monter des pentes ou passer des inégalités de terrain ne posent aucun problème.



La vitesse est réglable et progressive. Le V-Drive vous simplifie et vous rend agréable le déplacement d'une personne en fauteuil roulant.

Il existe 2 versions: la version standard pour les personnes jusque 135 kg et la version Heavy-Duty pour les personnes jusque 200 kg.

### Montage - Démontage

Facile à monter, la commande s'installe au choix à gauche ou à droite.

Le démontage du V-Drive est spécialement prévu pour le transport en voiture. Celui-ci s'opère en quelques secondes, après avoir déconnecté les batteries et le système de propulsion.

De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser le V-Drive, une sangle est prévue sur le système, qu'il vous suffit d'attacher à la poignée du fauteuil.

Le **NOUVEAU** réglage en hauteur permet au moteur d'être positionné horizontalement.



## S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

